


法国科玛嘉 (CHROMagar™) 显色培养基

产品名称	英文	货号	规格	报价
念珠菌显色培养基	CHROMagar™Candida	CA220	1000ml	760
		CA223-25	25L	15000
定位显色培养基	CHROMagar™Orientation	RT410	1000ml	600
		RT413-25	25L	14000
大肠杆菌显色培养基	CHROMagar™E. coil	EC166	1000ml	600
		EC169-25	25L	14000
ECC 显色培养基	CHROMagar™ECC	EF320	1000ml	600
		EF-323-25	25L	14000
0157 显色培养基	CHROMagar™ 0157	EE220	1000ml	630
		EE223-25	25L	15000
0157 显色培养基 (改进型)	CHROMagar™ 0157+	EF220+	1000ml	660
金黄色葡萄球菌显色培养基	CHROMagar™ Staph aureus	TA670	1000ml	1100
		TA670	500ml	560
		TA672	5L	5300
MRSA 显色培养基	CHROMagar™MRSA	MR500	1000ml	1500
		MR502	5L	7000
李斯特菌显色培养基	CHROMagar™ Listeria	LM851	1000ml	1100
		LM852	5L	5300
弧菌显色培养基	CHROMagar™ Vibrio	VB910	1000ml	1000
		VB912	5L	4500
沙门氏菌显色培养基	CHROMagar™ Salmonella	SA130	1000ml	600
		SA133-25	25L	14000
假单胞菌显色培养基 (绿脓)	CHROMagar™ Pseudomonas	PS820	1000ml	1100
		PS822	5L	5300
B 群链球菌显色培养基	CHROMagar™ StrepB	SB282	1000ml	1500
蜡样芽孢杆菌显色培养基	CHROMagar™ B. cereus	BC732	1000ml	1200
阪崎肠杆菌显色培养基	CHROMagar™E. sakazakii	CS812	1000ml	760
不动杆菌显色培养基		AC092	1000ml	1500
STEC 显色培养基	CHROMagar™ STEC	ST160	1000ml	1500
李斯特菌鉴定显色培养基	CHROMagar™ Identification Listeria	LK970	250ml	2200
沙门氏+菌显色培养基	CHROMagar™ Salmonella Plus	SA162	1000ml	1100
		SA163	5L	5300
VRE 显色培养基	CHROMagar™ VRE	VR952	1000ml	1500
ESBL 显色培养基	CHROMagar™ ESBL	ESRT1	1000ml	1500
KPC 显色培养基	CHROMagar™ KPC	KPRT1	1000ml	1500
CTX-M 显色培养基	CHROMagar™ CTX-M		1000ml	1500
耐碳青霉烯类显色培养基	CHROMagar™mSupeCARBA	SC172	1000ml	1800
空肠弯曲菌显色培养基	CHROMagar™Campylobacter	CP572	1000ml	1500
志贺氏菌显色		ESM012T	1000ml	900

CHROMagar™ Candida

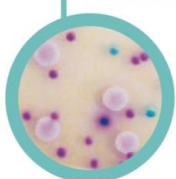

Product code:
CA220: 1 L pack
CA222: 5 L pack
CA223-25: 25 L pack

读板:


- 白色念珠菌
-->绿色
- 热带念珠菌
-->金属蓝色
- 柔克念珠菌
-->粉色、绒毛状

主要临床念珠菌的分离和鉴别

高达99%的灵敏度、特异性

酵母菌是老年人和艾滋病患者等免疫力低下人群尤为易感的病原体。科玛嘉念珠菌显色培养基可以通过菌落颜色区分出不同的念珠菌。科玛嘉念珠菌显色培养基包含有效并易于鉴定混合念珠菌的培养物，因为在某些情况下，即使是轻微感染病人的样品中也可能会出现抗真菌耐药株。

CHROMagar™ Staph aureus

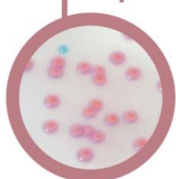

Product code
TA670: 1 L pack
TA672: 5 L pack

读板:

- 金黄色葡萄球菌
-->粉色至紫色
- 其它菌落
-->无色、蓝色或抑制生长

金黄色葡萄球菌的分离和鉴别

95.5%灵敏度、99.4%特异性

在诊断领域和食品工业中，金黄色葡萄球菌是主要的病原菌之一。由于医院内感染金黄色葡萄球菌造成了越来越严重的问题，所以需要准确并快速检测金黄色葡萄球菌。传统培养基会产生大量假阳性和假阴性。经过24h科玛嘉金黄色葡萄球菌显色培养基经过24h培养，即可对金黄色葡萄球菌进行高灵敏度和高特异性的鉴别。减少了许多针对非金黄色葡萄球菌菌株的过氧化氢酶和乳胶凝集试验。

CHROMagar™ Orientation



Product code
RT410: 1 L pack
RT412: 5 L pack
RT413-25: 25 L pack

读板:


- 大肠杆菌
-->深粉色至淡红色
- 克雷伯菌属，肠杆菌属，沙雷菌属
-->金属蓝色
- 柠檬酸杆菌属
-->红色晕
- 变形杆菌属
-->棕色晕
- 金黄色葡萄球菌
-->金色，不透明，
- 腐生葡萄球菌
-->粉色，不透明，
- 肠球菌属
-->翠蓝色

尿路致病菌的分离和鉴别

99.3%大肠杆菌灵敏度

该培养基的主要检测对象是尿路病原体，如大肠杆菌为清晰的棕色晕菌落等。科玛嘉尿道定位显色培养基作为一种一般营养琼脂对分离各类微生物具更广泛的应用。科玛嘉尿道定位显色培养基可以区别其他感染部位的微生物，例如疤痕，并可联合不同抗生素用以检测日益严重的院内感染和多重耐药微生物。

CHROMagar™ Pseudomonas

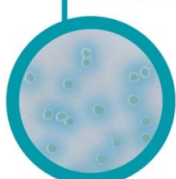

Product code
PS820: 1 L pack
PS822: 5 L pack

读板:

- 假单胞菌包括铜绿假单胞菌
-->蓝绿色
- 其它菌属
-->无色，或抑制生长

假单胞菌属的分离和鉴别

假单胞菌感染大多来源于院内感染，是一种新出现的临床致病菌。同时，流行病学研究表明，临床分离株的抗生素耐药性在不断增加。

科玛嘉假单胞菌显色培养基中不同菌落着色鲜明，因而所得结果快速并且清晰。

CHROMagar™ Packaging Sizes

The unit size of our packs is the **Liter**: quantity sufficient to prepare "X" L of media

Standard pack sizes are:

PACK	PACK	PACK
1L	5L	25L
around 50 plates	around 250 plates	around 1250 plates

Dehydrated media:

- Flexibility of use: Prepare only the quantity you need
- Very easy to prepare.
- Long shelf life: 2 to 3 years.





1st MRSA
chromogenic
detection media
(2002)



Product code
MR500: 1 L pack / MR502: 5 L pack
MR513-25: 25 L pack

CHROMagar™ MRSA

读板:

◎耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)
->粉红色至淡紫色

◎甲氧西林敏感型金黄色葡萄球菌 (MSSA)
->抑制

◎其他细菌
->蓝色, 无色或抑制

用于分离和鉴别耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 包括少量的MRSA

100%的灵敏度/特异性

2002年科玛嘉研发生产了第一个检测耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的显色培养基, 在这一领域引发了一场革命。这种培养基减少了大量的培养时间和实验室的工作量, 从而可以对病人进行绝对必要地大规模筛查

由于不能快速检测对抗生素耐药的革兰氏阴性菌而导致其失控扩散, 有时会导致治疗失败。结合科玛嘉尿道定位显色培养基先后引进了一套选择性的培养基, 其专为不同种类对抗生素敏感性降低的革兰氏阴性菌的筛查而设计。



Product code
ESR12: 5 L pack
ESR13-25: 25 L pack

CHROMagar™ ESBL

科玛嘉ESBL显色培养基
用于检测超广谱β-内酰胺酶产生菌

100%的敏感性
93.3%的特异性

读板:

◎内酰胺酶大肠杆菌
->深粉红色至红
◎内酰胺酶克雷伯菌属, 肠杆菌属
->金属蓝色
◎变形杆菌ESBL
->棕色环



Product code
KPR12: 5 L pack
KPR13-25: 25 L pack


CHROMagar™ KPC

科玛嘉KPC显色培养基
用于检测碳青霉烯类耐药细菌

100%的敏感性, 98.8%的特异性

读板:

碳青霉烯类的大肠杆菌
->深粉红色至红
碳青霉烯类
->克雷伯菌属, 肠杆菌属
枸橼酸杆菌
->金属蓝色
假单胞菌碳青霉烯类---米色, 半透明

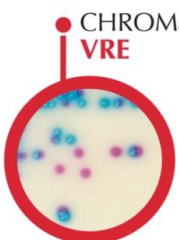

Product code
VR952: 5 L pack
VR953-25: 25 L pack

CHROMagar™ VRE

用于检测vanA/ vanB 屎肠球菌和分肠球菌


95.5%的敏感性, 90.4%的特异性

粪肠球菌和屎肠球菌中对万古霉素耐药的菌株有可能发展成致病性病原体。实验室若能快速检测抗万古霉素肠球菌并实施有效的控制措施, 可避免其传播。

使用科玛嘉VRE显色培养基能够很容易地在温育24小时后通过菌落颜色检测到万古霉素耐药粪肠球菌和屎肠球菌。

读板:

◎VE-粪肠球菌/抗万古霉素肠球菌孢子
->粉红色至紫红色
◎鸡肠球菌/酪黄肠球菌
->抑制的显蓝色
◎其他细菌
->抑制

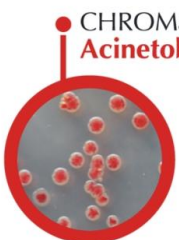

Product code
AC092: 5 L pack

CHROMagar™ Acinetobacter

用于检测不动杆菌

94.7%的敏感性, 91.6%的特异性

不动杆菌是一种在环境表面具有很强生存能力的生物体, 其获得抗生素耐受的能力是院内感染日益严重的原因。例如在医院, 鲍曼不动杆菌可以通过开放性伤口, 导管和呼吸道进入人体。任何有效的感染控制政策应有粪便监控, 科玛嘉不动杆菌显色培养基是一种专门为该项目设计的, 生长的菌落为艳红色。

读板:

◎不动杆菌
->红色



CHROMagar™ Y. enterocolitica



Product code
YE492: 5 L pack

读板:

- ◎ 致病性结肠炎耶尔森杆菌
--> 淡紫色
- ◎ 非致病性结肠炎耶尔森杆菌与背景菌属
(柠檬酸杆菌属、肠杆菌属、气单胞菌属等)
--> 抑制、限制增长或金属蓝色

致病小肠结肠炎耶尔森菌的检测和直接鉴别

灵敏度100%，特异性99%。

在耶尔森氏菌类中，结肠炎耶尔森杆菌是一种最常见的食源性致病菌。传统的耶尔森氏菌培养基，像CIN琼脂，允许致病性和非致病性的生物类型同时生长，耗费了大量的工作及花费在假阳性菌株上。

科马嘉结肠炎耶尔森杆菌显色培养基菌落的颜色鲜明，可以快速鉴别致病菌株，工作者可集中精力和资源分析真正有潜在致病性的可疑菌落。

CHROMagar™ Salmonella



Product code
SA130: 1 L pack
SA132: 5 L pack
SA133-25: 25 L pack

读板:

- ◎ 沙门氏菌包括伤寒沙门菌
--> 淡紫色
- ◎ 其他菌属
--> 蓝色、无色或被抑制

沙门氏菌的检测和分离

灵敏度100% 特异性89%

利用硫化氢特性检测沙门氏菌的常规培养基特异性较低，导致罕见且真正的阳性沙门氏菌中出现很多假阳性（弗劳地枸橼酸杆菌，变形杆菌等）。常规检测特异性较低，出现很多假阳性，假阳性结果的出现影响对真正沙门氏菌的检测。科马嘉沙门氏菌显色培养基大大减少了假阳性的出现，这使工作人员专注于真正的感染样品。

CHROMagar™ StrepB



Product code
SB282: 5 L pack
SB283-25: 25 L pack

读板:

- ◎ B族链球菌
--> 淡紫色
- ◎ 其他微生物
--> 蓝色，无色或抑制

B族链球菌的分离和鉴别

灵敏度92%，特异性95%

B族链球菌（GBS）易引起重症新生儿感染如脑膜炎、败血症。为防止新生儿感染，最有效的是对孕妇进行B族链球菌阴道定植检查。

科马嘉B族链球菌显色培养基具有高灵敏性和高度特异性，仅在有氧培养18-24小时后便可进行B族链球菌（无论溶血与否）的检测。

LIM RambaQUICK™ StrepB



用于B族链球菌筛查的选择性增菌液

CDC建议孕妇在35~37妊娠周时检测B族链球菌，先对阴道和肛门直肠拭子采集的样本进行选择性的增菌液增菌，进而传代培养。然而，选择性培养基并不专门抑制肠球菌，通常情况下，部分肠球菌类的生长能够影响B族链球菌的生长，导致检查结果假阴性。LIM RambaQUICK™ B族链球菌培养基是一种选择性富集肉汤，有效抑制肠球菌，促使B族链球菌生长，由此提高了产前筛查方法的灵敏度。

CHROMagar™ STEC



Product code
ST160: 1 L pack
ST162: 5 L pack
ST163-25: 25 L pack

读板:

- ◎ 常见的产志贺毒素血清型大肠杆菌:
-->淡紫色;
- ◎ 其他肠杆菌科:
-->无色, 蓝色或者被抑制。

用于产志贺毒素大肠杆菌 (STEC) 的检测

灵敏性89.1%, 特异性91.4%

研究表明, O157缺陷型的产志贺毒素大肠杆菌是食源性中毒暴发的主要原因。

很多情况下, 实验室因为没有用于O157缺陷型大肠杆菌的选择性培养基,不能广泛开展常见O157血清型的病原性大肠杆菌的检测。科玛嘉设计的产志贺毒素大肠杆菌显色培养基可以弥补这个缺陷: 不但可以检测常见的O157型STEC, 还可以检测许多其它血清型肠杆菌, O157型STEC呈淡紫色菌落。此培养基可作为大量样品筛选工具。

Rambach™ Agar

1st commercially available chromogenic media since 1989!



Product code
RR701: 4*1000 ml pack
RR703-25: 25 L pack

读板:

- ◎ 沙门氏菌:
-->红色;
- ◎ 许多大肠杆菌群:
-->蓝色, 紫色;
- ◎ 变形杆菌属等:
-->无色。

用于检测和分离临床和食品样本中的沙门氏菌属。

灵敏性93.7%

传统方法检测沙门氏菌特异性很差。常带来大量无用工作, 以至于漏检。Rambach琼脂培养基能够排除大多数假阳性。

Rambach琼脂培养基具有非常高的特异性, 即使样本中只含有极少量的沙门氏菌也能检测出来, 并且极大地减少工作量。

RambaQUICK™ Salmonella



Product code
SQ001: 1 L pack

读板:

肉汤富集
Rambach快速检测沙门氏菌培养基

肉汤富集培养基, 用于沙门氏菌筛选。

二合一富集步骤:

Rambach快速选择肉汤是一种集常规富集、RVS和MKTTn肉汤培养基的功能于一体的混合培养基。在缓冲蛋白胨水中预培养之后, 沙门氏菌在培养基中培养, 指数生长7个小时即可鉴定结果。Rambach沙门氏菌肉汤不但为沙门氏菌提供高营养环境而且可以抑制竞争菌群的生长。

方法

- ① 预富集: 置于37°C的缓冲蛋白胨水18h;
- ② 将0.1ml预富集液加入10ml Rambach沙门氏菌肉汤中, 41.5°C培养7h;
- ③ 吸取10 μl Rambach沙门氏菌肉汤置于科玛嘉沙门氏菌属显色培养基上, 37°C培养18-24h;

观察并检验: 氧化酶试验、快速脲酶试验、血清学。

CHROMagar™ Salmonella Plus



Product code
SA162: 5 L pack
SA163-25: 25 L pack

读板:


- ◎ 沙门氏菌 (包括伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、乳糖阳性沙门氏菌):
-->淡紫色;
- ◎ 大肠杆菌:
-->无色;
- ◎ 大肠杆菌群:
-->蓝色。

用于检测和分离食物标本中沙门氏菌属 (包括乳糖阳性沙门氏菌)。

灵敏性99%

最近修订的ISO 6579使从食物中毒样本中分离乳糖阳性沙门氏菌阳性率不断增加。科玛嘉沙门氏菌显色培养基完全满足ISO 6579的要求, 且能简单清晰的识别沙门氏菌 (包括乳糖阳性沙门氏菌、伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌)。

CHROMagar™ O157

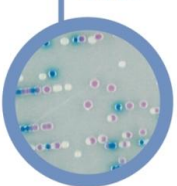

Product code
EE220: 1 L pack
EE222: 5 L pack
EE223-25: 25 L pack

读板:

- ◎ 大肠杆菌O157:
-->淡紫色;
- ◎ 其他细菌:
-->金属蓝色, 无色, 或被抑制。

用于选择、分离和鉴别食品和临床样本中的大肠杆菌O157。

针对大肠杆菌O157的灵敏性98%

麦康凯山梨糖醇培养基是检测大肠杆菌O157的常规培养基, 特异性差, 出现很多假阳性结果, (变形杆菌、黑氏埃希杆菌等)。由于待检病菌在山梨糖醇麦康凯培养基中是无色菌落, 而其他菌落呈现红色, 较难观察到目的菌落。科玛嘉大肠杆菌O157培养基培养的大肠杆菌O157呈淡紫色, 明显区别与其他菌的蓝色和无色菌落, 极易鉴别。增加亚硫酸钾可以提高培养基的选择性。

CHROMagar™ Vibrio



Product code
VB910: 1 L pack
VB912: 5 L pack
VB913-25: 25 L pack

读板:


- ◎副溶血弧菌
-->紫红色
- ◎创伤弧菌/霍乱弧菌
-->蓝绿色到翠蓝色
- 溶藻弧菌
-->无色

用于副溶血弧菌, 创伤弧菌和霍乱弧菌的分离和检测

95%特异性

副溶血弧菌, 创伤弧菌和霍乱弧菌常见于海产品中, 可引起严重中毒。传统方法(硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖琼脂培养基)检测这类细菌费时且需要大量的工作, 同时其敏感度不高。科玛嘉显色培养基则通过高灵敏度检测和易于区分的菌落颜色, 易于将副溶血弧菌和霍乱弧菌与其他的弧菌区分开。

E.sakazakii Agar

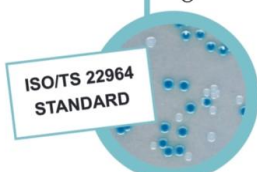

Product code
CS812: 5 L pack


读板:

- ◎阪崎肠杆菌
-->绿色到蓝色
- ◎其他革兰氏阴性菌
被抑制, 无色或者是
-->浅紫色 / 无色克隆
- ◎革兰氏阳性菌
-->被抑制

用于阪崎肠杆菌的检测

阪崎肠杆菌属于肠杆菌家族的革兰氏阴性、无芽胞菌。它很可能引起到脑膜炎和肠炎的爆发, 尤其是婴儿安慰奶。阪崎肠杆菌琼脂是根据ISO / TS22964标准进行检测食物, 主要针对奶粉中的阪崎肠杆菌。

CHROMagar™ Listeria Method

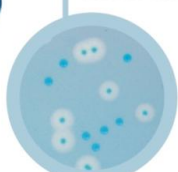

Product code CHROMagar Listeria
LM851: 1 L pack / LM852: 5 L pack

分离碟阅读:

- ◎单核细胞增生李斯特菌
-->蓝色
直径小于3mm, 有规律的
白色光环

+

确认碟阅读:

- ◎单核细胞增生李斯特菌
-->被白色光环包围的
玫红菌落



Product code CHROMagar Identification Listeria
LK970: 250 ml pack

用于食物样品中单核细胞增生李斯特菌与其他菌的检测

100%特异性

单核细胞增生李斯特氏菌是一种致病性细菌, 可引起严重的食物中毒。由于单核细胞增生, 李斯特菌和英诺克李斯特菌具有相似的生化特性, 无法通过传统的办法区分两种菌。本产品中单核细胞增生李斯特菌菌落有一个被白色光环包围特异蓝色菌落。科玛嘉李斯特显色培养基能在2天时间内检测阴性样品。这个方法只需要一个半弗雷泽浓缩步骤并且经过了验证。直接从科玛嘉李斯特显色培养基中挑选一个疑似菌落, 转种到科玛嘉李斯特菌鉴定培养基进行鉴定, 第二天即可得出是否为阳性菌落。

CHROMagar™ B.cereus



Product code
BC732: 5 L pack

读板:

- ◎蜡状芽孢杆菌群
-->蓝色与白色光环
- ◎其他芽孢杆菌
-->蓝色, 无色或被抑制
- ◎革兰氏阴性菌
-->被抑制
- ◎酵母和霉菌
-->被抑制

检测和计算蜡样芽孢杆菌菌群

100%敏感 / 100%特异性

方便食品易于引起蜡样芽孢杆菌食物中毒。蜡样芽孢杆菌在干豆类及谷类中存在, 且从干制食品例如调味料, 混合调味品和土豆中也已发现其存在。蜡状芽孢杆菌在基本透明的科玛嘉蜡样芽孢杆菌显色培养基上培养后, 产生半透明晕环包围的亮蓝色菌落, 对比明显。相对于传统方法, 在粉色甘露醇琼脂上生长出红色菌落, 更便于判读。

CHROMagar™ Malassezia



Product code
MZ282: 5 L pack

读板:


- ◎糠秕马拉色菌
-->菌落大, 淡粉色
且有褶皱;
- ◎其他马拉色菌属
(包括球形马拉色菌、
马拉色菌属)
-->主要是粉紫红色。

用于检测马拉色菌属

马拉色菌是一种在人和动物皮肤上发现的真菌, 在健康的皮肤上它不会导致传染病, 但当皮肤抵抗力下降时, 马拉色菌能够引起几种皮肤病, 如严重的皮炎和耳炎(分别指皮肤和耳部的炎症)。由于马拉色菌属具有相似的形态、生化特征, 所以基于表型特征来分离它们的传统培养基不能对其进行有效区分。科玛嘉马拉色菌显色培养基是为了易于检测且提高区分度而开发的。

水产业

大肠杆菌是粪便污染的指标。一般食品标准限值大肠杆菌每克 ≤ 50 ，因此，要准确地检测和计数它们变得很重要，传统的方法来检测大肠杆菌是非常繁琐的，对许多可疑菌落测试通常需要繁重的工作。

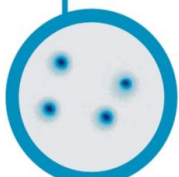
CHROMagar™
E.coli

Product code
EC160: 1 L pack
EC166: 5 L pack
EC168-25: 25 L pack

用于食品及水的样本中大肠杆菌的检测和计数
科玛嘉大肠杆菌培养基

读板:

- 大肠杆菌
-->蓝色
- 其它革兰氏阴性菌
-->无色
- 革兰氏阳性菌
-->抑制

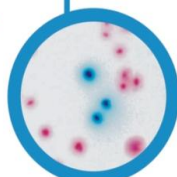CHROMagar™
ECC

Product code
EF320: 1 L pack
EF322: 5 L pack
EF323-25: 25 L pack

用于同时检测和计数食物或水样中大肠杆菌和其他大肠菌群
科玛嘉 ECC 显色培养基

读板:

- 大肠杆菌
-->蓝色
- 其他大肠菌群
-->紫红色
- 其他细菌
-->无色或抑制

CHROMagar™
Liquid ECC

Product code
EL382: 5 L pack

读板:

- 大肠杆菌
-->蓝色
- 其他大肠菌群
-->紫色
- 其他革兰氏阴性菌
-->无色或抑制

用于同时检测和计数 水样中大肠杆菌和大肠菌群。

这是一种创新的显色培养基，采用水过滤技术，以肉汤形式（无琼脂）来灌注。你可以等份准备你想要的肉汤的确切数量，让它使用的时候非常灵活，可以摆脱对配置好的培养基保存和有效期管理的痛苦，确保始终使用最新的培养基。

AquaCHROM™
ECC

formerly called AquaCHROM™



Product code
AQ056: 100*100ml pack

读板:

- 大肠杆菌
-->蓝色至蓝绿色的液体
- 其他大肠菌群
-->黄色液体

用于检测水样大肠杆菌和大肠菌群

液体技术

科玛嘉ECC液体培养基是一种非琼脂基础培养基，被设计用于100ml水样中检测大肠杆菌和其他大肠菌。与其它类似商品化检测方法相比较，它具有不需要紫外灯，即可确认样品中大肠杆菌的存在的优点。科玛嘉 ECC液体培养基使用两个不同色原体的新配方（而不是传统的色原体/荧光团组合）可以在普通光源条件下读出测试结果。当大肠菌群存在时，样品呈现黄色；当大肠杆菌存在时，呈现绿色。

AquaCHROM™
Enterococcus

读板:

- 肠球菌
-->绿色
- 其他
-->无色

检测水样中肠球菌

液体技术

科玛嘉肠球菌液体培养基是一种非琼脂基础培养基设计用于检测100ml水样品肠球菌的存在。肠球菌被用作微生物污染指示剂来检测日常用水的质量。菌群重要的特征是，它们相对于大肠杆菌/大肠菌群在水环境中往往存活时间更长，更耐干燥和氯化。

科玛嘉肠球菌显色培养基在检测肠球菌时变绿。